



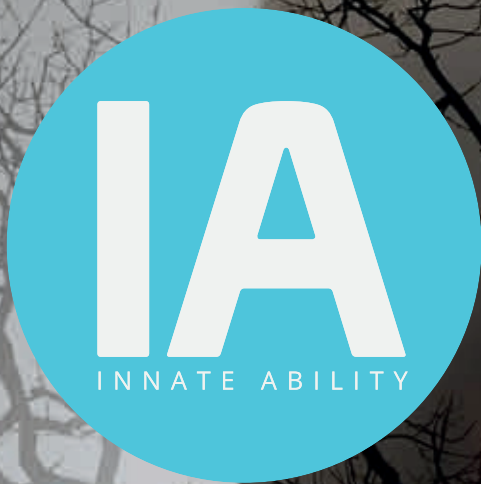

DENAVE

Manteniéndose en la CIMA

Seguridad y Eficacia en Tratamientos Vasculares

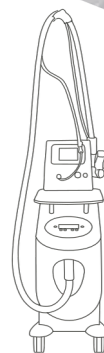

DENAVE se distingue en el ámbito de la Estética y la Dermatología.

DEKA
Innate Ability

Quick Wins de DENAVE:

- Áreas extensas de rosácea
- Telangiectasias difusas
- Lunares
- Hemangiomas
- Manchas de la edad
- Lentigos

¿Que es DenaVe?:

El nuevo sistema DenaVe es un láser de estado sólido que emite a 585 nm a través de cable de **Fibra Óptica**. Utiliza la tecnología FSOPS (Semiconductor Ópticamente Bombardeado con Desplazamiento de Frecuencia) y representa una innovación en su campo.

La solución ideal para los médicos que buscan resultados óptimos en vascularidad y pigmentación, minimizando tanto el costo de propiedad como el tiempo de inactividad del paciente.

¿Por qué elegir DenaVe?

Láser de Alta Tecnología de 585 nm (no es de colorante)

La tecnología de FSOPST establece a DenaVe como el estándar de oro en el tratamiento para evitar los inconvenientes de la tecnología de colorante pulsado en el tratamiento de lesiones vasculares (como los costos de consumibles y mantenimiento elevado, el tiempo de calentamiento, etc.).

Máxima Comodidad del Paciente

DenaVe ofrece un riesgo mínimo de efectos secundarios, incluyendo púrpura y tiempo de inactividad mínimo.

Alta Precisión y Facilidad de Uso

Dena V. aporta una alta energía de manera selectiva y enfocada en el objetivo, produciendo un daño epidérmico mínimo.

LA CIENCIA DETRÁS DE

Una Tecnología de Estado Sólido que Supera los Límites del Láser de Tinte Pulsado

La longitud de onda de 585 nm ha sido considerada como la solución estándar de oro para aplicaciones vasculares superficiales durante más de 20 años.

DenaVe funciona de forma continua o pulsada y **elimina los costes de mantenimiento y consumibles de los láseres de colorante pulsados.**

Una Emisión Pulsada Específica

La emisión pulsada de DenaVe es más corta que el tiempo de relajación térmica (TRT) del vaso, lo que garantiza un tratamiento sin **púrpura con un tiempo de recuperación mínimo. Esto hace que el sistema sea adecuado para todo tipo de piel.**



Lo que dice la ciencia sobre

ELITESCAN™:


Un escáner integrado único para Acelera y Maximiza la Precisión

La tecnología del escáner EliteScan permite tratamientos de **grandes áreas de una manera muy precisa, segura y rápida**. Los parámetros seleccionables del escáner ofrecen a los usuarios una gestión óptima de la distribución del calor láser para cualquier tratamiento específico. La precisión del escáner **garantiza resultados** exactos y homogéneos, al tiempo que limita el calor innecesario en las áreas no afectadas para una **personalización perfecta del tratamiento**.

- ◆ Tono variable / densidad
- ◆ Patrón aleatorio para mayor seguridad y comodidad
- ◆ Modos de llenado seleccionables
- ◆ Tamaño del área de tratamiento ajustable
- ◆ Múltiples formas disponibles



Resultados Clínicos

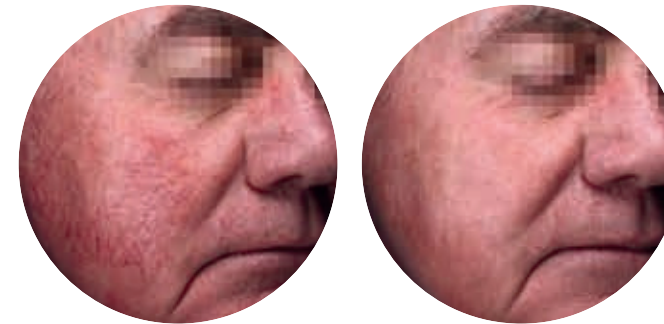

Cortesía de Thomas Griffin Jr., M.D.,
PA, EE. UU.



Cortesía de Paolo Sbano, M.D.,
Dermatólogo - Viterbo (Italia)
Publicado con el amable
permiso de Quanta System.



Cortesía de Paolo Sbano, M.D.,
Dermatólogo - Viterbo (Italia).
Publicado con el amable
permiso de Quanta System.

LA COMBINACIÓN PERFECTA
DenaVe'Strength

- **Rápidos, efectivos y seguros:** tratamientos que minimizan los efectos secundarios.
- **Gran selectividad:** ratio optimizado de absorción y profundidad de penetración.
- **Clínicamente efectivos:** adecuados para casi todos los tipos de piel.
- **Mínimo** tiempo de inactividad social después del tratamiento
- **Fácil** de usar
- **Bien tolerado** por los pacientes


Only for DEKA Users :
a great support in medical practice
DEKA Club

Longitud de onda verdadera de 585 nm en modo continuo. de Modos pulsados

Fiabilidad y durabilidad de la fibra óptica

EliteScan™ para tratamientos selectivos con daño epidérmico mínimo.

Sin costos de mantenimiento ni consumibles.

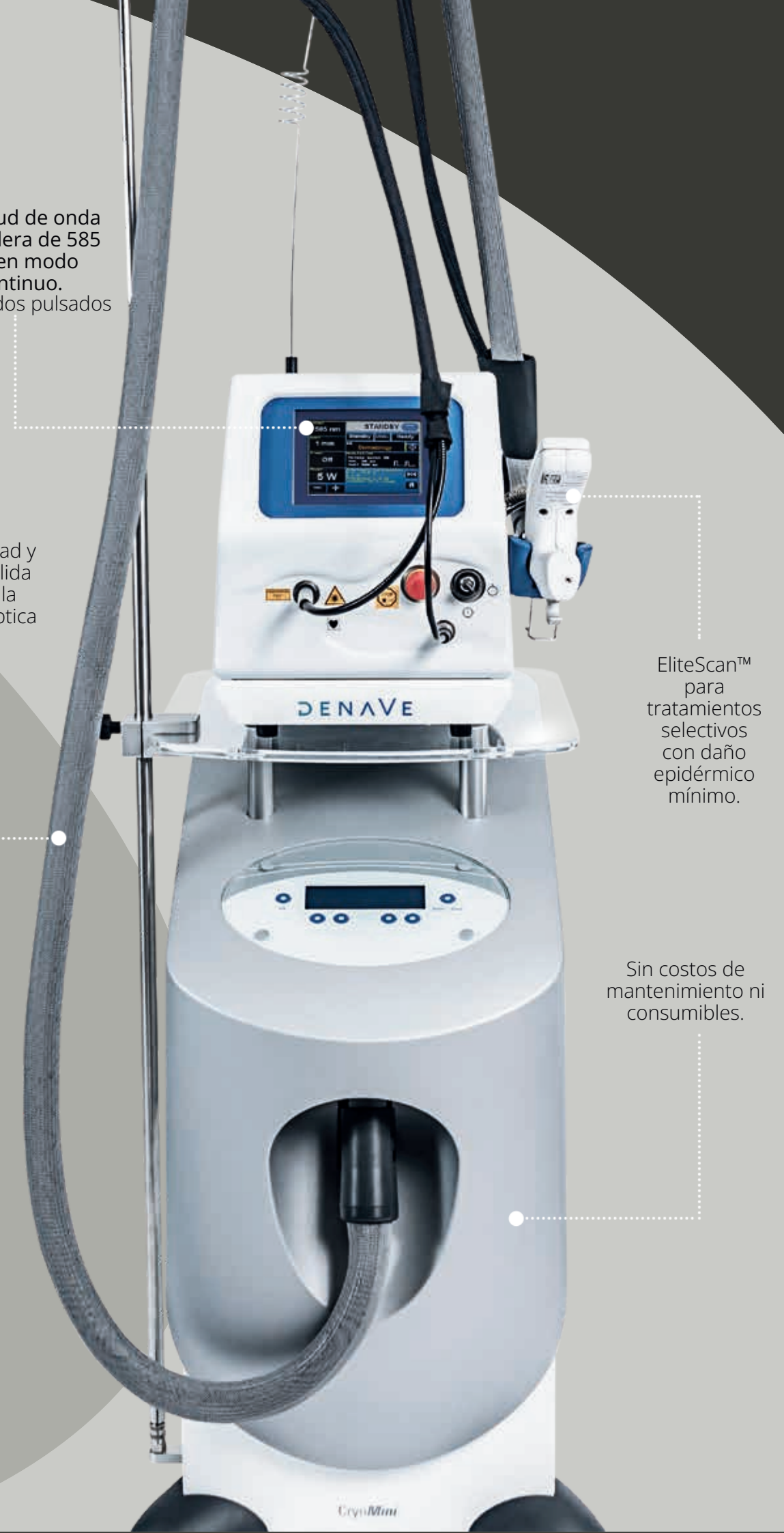

Technical Specifications

DENAVE	
Tipo de láser	Laser 580 +/- 6 nm
Potencia del láser	5 W (max)
Modo de operación	CW, Pulsed, Burst
Duración del Pulso	0.25 – 8000 ms Limited with scanner: 1-100 ms
Tasa de Repetición	De 0.095 Hz a 2000 Hz
Haz de Apuntado	650 nm diode laser (<4 mW)
Tamaño del Punto	0.5-1.0-1.5-3.0 mm
Dimensiones y Peso	314 mm (H) x 336 mm (W) x 366 mm (D) 9 Kg
Requerimientos Eléctricos	100-230 Vac; 50/60 Hz; 350 VA

ADVERTENCIA - Radiación láser visible e invisible. Evite la exposición de los ojos o la piel a la radiación directa o dispersa. Producto láser de Clase 4.



DENAVE



Follow us on



www.dekalaser.com

Dealer stamp



Quanta System S.p.A.
www.quantasystem.com

DEKA Innate Ability

Aspin-off of the El.En. Group, DEKA is a world-class leader in the design and manufacture of lasers and light sources for applications in the medical field. DEKA markets its devices in more than 80 countries throughout an extensive network of international distributors as well as direct offices in Italy, France, Japan and USA. Excellence is the hallmark of DEKA's experience and recognition garnered in the sphere of R&D in over thirty years of activity. Quality, innovation and technological excellence place DEKA and its products in a unique and distinguished position in the global arena. DEKA manufactures laser devices in compliance with the specifications of Directive 93/42/EEC and its quality assurance system is in accordance with the ISO 9001 and ISO 13485 standards.