




MOTUS AY

**Reconozca a su
jugador estrella**



Eficacia y comodidad con Moveo

Motus destaca en **estética y dermatología**

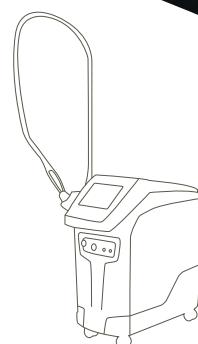

DEKA
Innate Ability



Beneficios rápidos de MOTUS AY:

Eliminación del vello | Lesiones vasculares
Lesiones pigmentadas benignas | Onicomiosis
Rejuvenecimiento cutáneo no ablativo
Pseudofoliculitis en la barba (PFB) | Várices piernas

Principios clave

Motus AY utiliza una combinación de las longitudes de onda más comunes: **Alex 755 nm** – la más efectiva en la eliminación del vello y **Nd:YAG 1064 nm** para los tratamientos vasculares.

Por qué elegir Motus:

Doble longitud de onda (Alex + Nd:YAG)

Vasto rango de aplicaciones: no solo eliminación del vello y lesiones pigmentadas, sino también tratamientos vasculares para satisfacer la demanda creciente de los pacientes.

Tecnología Moveo

Nueva frontera en la eliminación del vello y las lesiones pigmentadas: garantía de seguridad, comodidad, rapidez y eficacia.

Relación calidad-precio incomparable

Una combinación exitosa de coste y eficacia, con escasa necesidad de mantenimiento.



LA CIENCIA SUBYACENTE



Absorción del 100% de energía con la tecnología Moveo

La nueva tecnología de la pieza de mano integra una punta de zafiro que entra en contacto con la piel para reducir la consiguiente pérdida de energía. El nuevo método de eliminación del vello se basa en la repetición de pasadas sobre las zonas tratadas, que inducen un calentamiento gradual de las partes vitales del vello.

Eficacia y seguridad

La ausencia de dispersión de energía significa menor potencia para el mismo resultado.

Velocidad y comodidad

Las pasadas múltiples permiten tratar amplias zonas en pocos minutos.



Nuevo sistema de conexión plug-in

Moveo PL:

La nueva pieza de mano Moveo para lesiones pigmentadas

Los resultados máximos se obtienen aprovechando la longitud de onda ideal en el pigmento (Alex 755 nm) en un proceso de emisión de **baja fluencia en varias pasadas** con enfriamiento integrado, para la máxima comodidad y seguridad de los pacientes.

MOVEO PL es seguro, extremadamente efectivo y permite tratar todo tipo de piel en muy pocas sesiones, **con efectos secundarios o tiempo de inactividad mínimos**.

NUEVO!
—
MOVEO PL



Selección de más de 10 piezas de mano estándar

Puntos de 2,5-20 mm disponibles con sistema de reconocimiento automático del punto y conector ergonómico para el enfriamiento por aire.



Un simple clic para detener y retomar el tratamiento

Punta de zafiro de 20 mm

Sistema de enfriamiento integrado

LA CIENCIA SUBYACENTE



Innovación tecnológica revolucionaria

Motus AY hace que la depilación con Alex sea efectiva, indolora y sencilla tanto para los **fototipos claros como para los** más oscuros **así como para los vellos finos y claros.**

La fuente Nd:YAG amplía el campo de acción al ofrecer la posibilidad de tratar **lesiones vasculares** como capilares o telangiectasias.

**Láseres Alex y Nd:YAG,
los únicos en movimiento**

Procedimiento sin humo

Doble energía suministrada a la piel

Tratamiento para todos los fototipos



eficacia



velocidad



seguridad




simplicidad




Resultados clínicos



Láser de alejandrita con tecnología Moveo.
Concesión de **M. Troiano**, Doctor en Medicina
y del **Prof. P. Bonan**, Doctor en Medicina -
Florence, Italia.

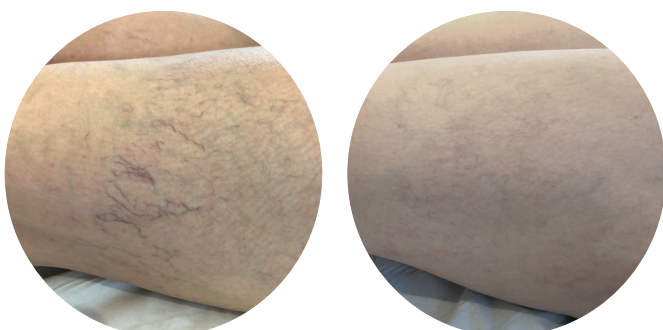

Fuente láser Nd:YAG.
Concesión de **Setsuko Beauty Clinic Ltd**,
Bridgwater - Reino Unido

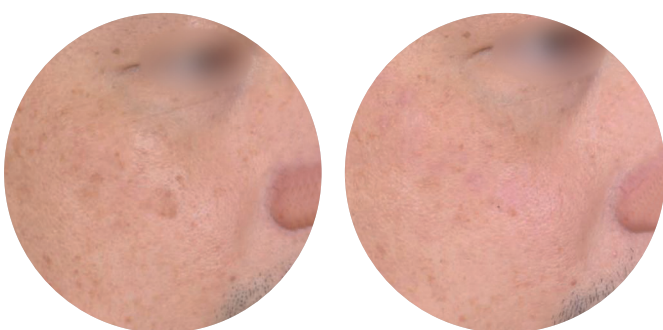

Pieza de mano Moveo PL
Concesión de **Li Ying Lin**,
Doctor en Medicina - Elite Clinic,
Taipei-Taiwán



Conocer a nuestra audiencia y mercado

Gracias a una conciencia estética cada vez mayor de los consumidores en todo el mundo, el mercado mundial de la depilación está experimentando un aumento vertiginoso de su magnitud y valoración.

LA ELIMINACIÓN TOTAL DEL VELLO*:



1º

TRATAMIENTO SOLICITADO DENTRO
DE LA INDUSTRIA ESTÉTICA



+17%

TASA DE CRECIMIENTO
ANUAL COMPUESTO



**MÁS DE
3.9 millones de \$**
PREVISTO HASTA 2026

*Fuentes: Informe del estudio de mercado "Global Laser Hair Removal Market Size Status And Forecast 2019-2025"
Acumen Research and Consulting "Laser Hair Removal Market Size, Share, Trends, Scope, Growth Opportunity and Forecast 2019-2026"

Opinión de los profesionales sanitarios

“ En estos últimos años hemos tenido láseres que son seguros para la piel oscura, pero con un límite de eficacia. Motus AY, en cambio, fue diseñado para reducir la pérdida de energía del láser mientras se mueve sobre la piel. La transferencia de energía concentrada y duplicada a la piel significa que Motus funciona mejor que otros láseres en las pieles de tonos más oscuros.”

Dr. Paul Jarrod Frank, Dermatólogo,
Nueva York - EE.UU.

“ Con Motus AY, ¡DEKA ha revolucionado el concepto del láser de alejandrita! La eficacia de esta fuente de láser en la fotodepilación está reconocida a nivel científico y clínico. Gracias a la innovadora tecnología MOVEO, la eliminación del vello con láser de alejandrita ahora no solo es EFICAZ sino también SEGURA y PLACENTERA, adecuada incluso para los tipos de piel más oscuros.”

Prof. Paolo Bonan, Doctor en Medicina
Clínica Villa Donatello, Florencia, Italia

LA COMBINACIÓN PERFECTA

Ventajas de MOTUS AY

Plena comodidad para profesionales y pacientes:

- Láser Alejandrita y Nd:YAG los más rápidos y únicos en movimiento
- Fluidez y ligereza de la pieza de mano de contacto
- Fácil aprendizaje de uso
- Eficaz en todos los fototipos
- Sin pérdidas de energía
- El tratamiento más rápido: 100 cm² en aprox. 25 segundos
- Ninguna quemadura o decoloración cutánea
- Indoloro



Exclusivamente para usuarios de DEKA:

una extraordinaria asistencia en la consulta médica

DEKA Club

Tecnología **Moveo**

Piezas de mano con puntos de 2,5-20 mm

Más de **200 protocolos desarrollados**
para Moveo y piezas de mano estándar



Fuente láser
Alejadrita 755 nm

Fuente láser
Nd:YAG 1064 nm

Alimentación
eléctrica 16 A

Especificaciones técnicas

MOTUS AY		
Fuente láser	Alejandrita 755 nm	Nd:YAG 1064 nm
Energía por pulso	31 J (máx.)	63 J (máx.)
Potencia láser	65 W (máx.)	95 W (máx.)
Velocidad de repetición	De 1 a 10 Hz	De 0,3 a 10 Hz
Tamaños de punto (opcional)	5 mm, 7 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm; Moveo HR, Moveo PL	
Luz guía	Láser de diodo verde a 532 nm < 4 mW	
Control de emisiones	Interruptor dactilar o interruptor de pedal	
Enfriamiento de la pieza de mano	Enfriador de la piel integrado	
Dimensiones y peso	90 (Al.) x 51 (An.) x 83 (D.) cm 90 kg	
Alimentación	230 Vca - monofásica - 50/60 Hz - 16 A	

PRECAUCIÓN - Radiación láser visible e invisible. Evite la exposición de la piel o los ojos a la radiación directa o difundida. Producto con láser de clase 4. Este folleto no está destinado al mercado de los EE.UU.



Sello del distribuidor

 **DEKA M.E.L.A. s.r.l.**
Via Baldanzese,17 - 50041 Calenzano (FI) - Italia
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

Capacidad innata de DEKA
DEKA, una empresa derivada del Grupo El.En., es líder global en el diseño y fabricación de láseres y fuentes de luz para aplicaciones en el ámbito de la medicina. DEKA comercializa sus dispositivos en más de 80 países a través de una amplia red de distribuidores internacionales y oficinas directas en Italia, Francia, Japón y EE.UU. La excelencia es el sello distintivo de la experiencia y el reconocimiento acumulados por DEKA en el ámbito de I+D tras más de treinta años de actividad. La calidad, la innovación y la excelencia tecnológica colocan a DEKA y sus productos en un lugar único y diferenciado en la escena global. DEKA fabrica dispositivos láser de conformidad con las especificaciones de la Directiva 93/42/EEC y su sistema de control de calidad cumple los requisitos de las normas ISO 9001 e ISO 13485.