



Glide

**El láser de CO₂ más
novedoso para la salud
íntima de las mujeres**

MonaLisa *Touch*®

Terapia revolucionaria para
la intimidad de las mujeres

Glide destaca en: **Ginecología**



DEKA
Innate Ability

GLIDE

EXCELENCIA EN EVOLUCIÓN

SÍNDROME
GENITOURINARIO
DE LA MENOPAUSIA

SÍNTOMAS DE
HIPOESTROGENISMO
POSTPARTO


CIRUGÍA GENITAL
ESTÉTICA Y FUNCIONAL
Y COLPOSCOPIA



Principios clave

DEKA es la nueva plataforma láser de CO₂ que, gracias a sus más de 30 años de experiencia, ha introducido un nuevo sistema y una serie de accesorios más ergonómicos y de alto rendimiento. La tecnología PSD única y exclusiva puede generar formas de pulso específicas para las distintas áreas corporales que tratar, lo que hace que esta tecnología sea ideal para el tratamiento de problemas vulvovaginales.

Por qué elegir **GLIDE**:

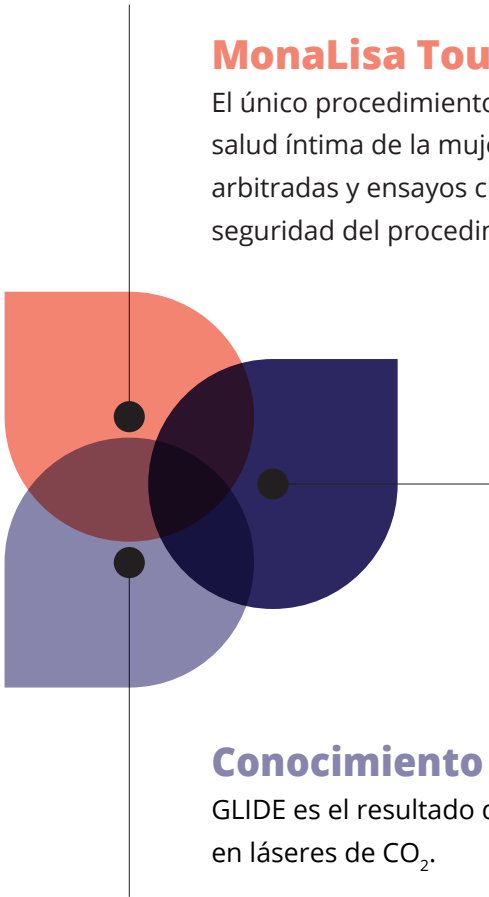

MonaLisa Touch®

El único procedimiento láser validado científicamente para la salud íntima de la mujer. Más de 80 publicaciones internacionales arbitradas y ensayos clínicos han confirmado la gran eficacia y seguridad del procedimiento MonaLisa Touch.

Versatilidad sin igual

Desde la salud íntima femenina hasta la ginecología colposcópica y la dermatología, gracias a la amplia gama de sistemas de microescaneo, este dispositivo se adapta perfectamente a las necesidades de los consultorios médicos de múltiples especialidades.

Conocimiento y experiencia

GLIDE es el resultado de décadas de experiencia pionera en láseres de CO₂.



Dispareunia

Comezón y ardor

Sequedad vaginal

MonaLisa Touch®

**EL PRIMER TRATAMIENTO E INIGUALABLE
PARA EL SÍNDROME GENITOURINARIO
DE LA MENOPAUSIA**

MonaLisa Touch® actúa sobre el tejido vaginal atrófico para restaurar la funcionalidad de la mucosa vaginal. No invasiva y segura, la terapia de MonaLisa ha demostrado ser altamente efectiva y tolerarse bien. El láser de CO₂ proporciona energía controlada a través de una sonda de ángulo completo insertada en el canal vaginal. El pulso D se dirige tanto al tejido superficial como

al profundo, aumentando la microcirculación, revitalizando la elasticidad de la mucosa vaginal y mejorando la hidratación y la sensibilidad de la zona vulvovaginal. Como resultado, MonaLisa resuelve los problemas más comunes que afectan la calidad de vida y las relaciones íntimas de las mujeres, como la sequedad vaginal, la picazón y el ardor y la dispareunia.

Redefiniendo la efectividad



Comité asesor internacional

En 2020, DEKA estableció un Comité Asesor Médico internacional para la Salud Íntima Femenina, que incluye profesores y expertos reconocidos de todos los continentes. El comité está comprometido con el desarrollo de nuevos protocolos y orientación clínica, y con el avance de las técnicas y los métodos láser.

Publicaciones científicas arbitradas

Más de 80 publicaciones internacionales arbitradas han confirmado la gran eficacia y seguridad del tratamiento MonaLisa Touch.



Resultados comprobados

MonaLisa Touch® es el único procedimiento probado por millones de tratamientos exitosos en todo el mundo.



LA CIENCIA SUBYACENTE

Máxima eficacia, Precisión y control total

**D-PULSE: la forma
de pulso específica para
la mucosa vaginal**

D-Pulse es una forma de pulso exclusiva, diseñada específicamente por DEKA para el tratamiento MonaLisa Touch a fin de garantizar la máxima eficacia (mediante el uso de la profundidad de penetración adecuada) sin ningún efecto secundario (control del efecto térmico).

Tecnología PSD

La tecnología PSD (Diseño de la forma del pulso) permite elegir entre varias modalidades de impulso para poder gestionar de forma selectiva la profundidad de vaporización y el efecto térmico: Pulso S, Pulso D, Pulso H, Pulso U, CW. Al variar la modalidad de impulso en la zona en cuestión, se obtienen diferentes efectos de ablación y estimulación para satisfacer las diversas necesidades clínicas.



SmartPulse (SP)



HighPulse (HP)



DEKAPulse (DP)



HECHO EN ITALIA

Los sistemas y dispositivos DEKA están todos diseñados y ensamblados en Italia. Para lograr nuestros objetivos de sostenibilidad, así como la trazabilidad, transparencia y fiabilidad de nuestra cadena de suministro, establecemos estándares ambientales internacionales para nosotros mismos y nuestros proveedores.

HECHO DE MANERA SOSTENIBLE

LA CIENCIA SUBYACENTE

Configuración completa con sistema de barrido

GLIDE ofrece una gama completa de nuevos sistemas de escaneo, optimizados en forma, peso y tamaño para maximizar la manipulación.

μ-SCAN V²LR

Sistema de barrido diseñado para tratar el síndrome urogenital menopáusico. La energía láser de CO₂ fraccionada se transmite a las paredes vaginales, estimulando eficazmente la regeneración tisular para obtener resultados sin igual. Este sistema de barrido puede utilizarse con diferentes tipos de aplicadores, tanto para tratamientos dentro del canal vaginal como vulvar, lo que lo hace adaptable a las necesidades de todas las pacientes.

Máxima capacidad de adaptación al paciente

Diversos tipos de sondas disponibles para responder a las necesidades clínicas y/o anatómicas específicas de cada paciente.



(23 mm de diámetro)



(360°, esterilizable en autoclave)



(16 mm de diámetro)



(aplicador vulvar)



¡NUEVO!

MonaLisa
Butterfly



MONALISA BUTTERFLY: ¡El tratamiento se vuelve más seguro, repetible y fácil de realizar!

Un nuevo sistema robotizado, sincronizado con la emisión y los parámetros del láser, que facilita el movimiento de la pieza de mano en la vagina y, sobre todo, estandariza el tratamiento.

Gracias a este innovador dispositivo, basta con configurar los parámetros de la base de datos y el tratamiento se realiza automáticamente, de manera segura y uniforme. MonaLisa Butterfly es una herramienta revolucionaria que ayuda al médico a realizar el tratamiento MonaLisa Touch.

ColpoSCAN

Este nuevo accesorio que combina el sistema de barrido y la micropieza de mano amplía las aplicaciones de Glide para incluir la microcirugía colposcópica asistida por escaneo.

Las características de este sistema compacto, compatible con todos los colposcopios, convierten a este instrumento en el referente para tratamientos extremadamente precisos, seguros, repetibles y rápidos.

¡NUEVO!

Modo de ablación de ablación 3D con control de profundidad y ablación rápida para una acción de alta velocidad

FÁCIL CONTROL

5 funciones controladas por el exclusivo joystick microinterruptor:

- **Rotación** de las figuras de barrido (paso a paso y rápido).
- Regulación del **tamaño de escaneo**.
- **Scan-ON/Scan-OFF**.
- **Modificación de forma de escaneo**.
- Al presionar el joystick, puede abrir el **menú de configuración** y **centrar el rayo láser en 4 ejes**.

Con Easy Control se gestionan todas las funciones del sistema mientras se sigue observando el área de tratamiento a través del colposcopio.

FÁCIL CONECTOR

- Conexiones rápidas y cableado interno.

ÁMBITO FÁCIL

- **Regulación mecánica del área de trabajo** para confinar con precisión el rayo láser dentro del ámbito de trabajo.



ESCANEEO INTEGRADO-μ

- Rayo láser **ultrarrápido** (100 millonésimas de segundo).
- **Formas de barrido de alta precisión**, para corte de tejidos y ablación.



Fácil enfoque

- Zoom con **tecnología HOLO completa** (lente holográfica y espejos de alta reflectancia).
- Sistema de **enfoque/desenfoque** de anillo único con **memoria de punto focal**.
- Perfecta **correspondencia entre la luz guía y el láser de CO₂**.

LA COMBINACIÓN PERFECTA

Los puntos fuertes de GLIDE

Los operadores y los pacientes se benefician de:

- La única **terapia láser en profundidad validada científicamente** para la salud íntima de la mujer
- Conocimiento que abarca más de 30 años
- Aporta una **eficacia inigualable en la salud íntima** de las mujeres
- Soluciones tecnológicas avanzadas exclusivas (PSD y SmartStack) para maximizar los resultados
- Extrema flexibilidad y máxima adaptabilidad a las necesidades de los pacientes
- Amplia gama de aplicaciones gracias a la configuración completa de microescáneres
- **Más de 30 años de experiencia** en la fabricación de láseres de CO₂

 **Solo para usuarios de DEKA:**
un gran apoyo en la consulta médica
DEKA Club

GUI intuitiva
(pantalla táctil
giratoria de 15,6")

Función SmartTrack
y SmartStack

Base de datos
multimedia

Sistemas de barrido
miniaturizados

Tecnología PSD

Teleasistencia



Especificaciones técnicas

GLIDE - Configuración recomendada para ginecología

LÁSER DE CO₂

Tipo de láser	CO ₂ RF - PSD®
Longitud de onda	10.6 µm
Modo de emisión láser	TEM ₀₀
Modo de emisión	CW - SP - DP - HP - UP
Potencia media a la salida de la pieza de mano	0.1 - 60 W
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Base de datos interna	Más de 100 protocolos guardados en fábrica, actualizados con USB. Posibilidad de almacenar un número ilimitado de protocolos personalizados por el usuario.
Panel de control	Pantalla táctil LCD a color
Dimensiones* y peso	137 (Al.) x 42 (An.) x 54 (Pr.) cm - 70 kg

*En este catálogo solo se presentan las características técnicas aplicables a ginecología.

También está disponible en configuración dermatológica. Consulte el folleto pertinente para conocer las características técnicas en dermatología.

PRECAUCIÓN - Radiación láser visible e invisible.
Evite la exposición de la piel o los ojos a la radiación directa o difundida.
Producto con láser de clase 4t.

Este folleto no está destinado al mercado de los EE. UU..



Glide

Síguenos en:



www.dekalaser.com

SELLO DEL DISTRIBUIDOR



DEKA M.E.L.A. s.r.l.

Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI) - Italia
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

Capacidad innata de DEKA

DEKA, una empresa derivada del Grupo El.En., es líder global en el diseño y fabricación de láseres y fuentes de luz para aplicaciones en el ámbito de la medicina. DEKA comercializa sus dispositivos en más de 80 países a través de una amplia red de distribuidores internacionales y oficinas directas en Italia, Francia, Japón y EE.UU. La excelencia es el sello distintivo de la experiencia y el reconocimiento acumulados por DEKA en el ámbito de I+D tras más de treinta años de actividad. La calidad, la innovación y la excelencia tecnológica colocan a DEKA y sus productos en un lugar único y diferenciado en la escena global. DEKA fabrica dispositivos láser de conformidad con las especificaciones de la Directiva 93/42/EEC y su sistema de control de calidad cumple los requisitos de las normas ISO 9001 e ISO 13485.

DEKA M.E.L.A. s.r.l. - Todos los derechos reservados - Con el propósito de mejorar sus productos, la empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso. Documento reservado exclusivamente para profesionales sanitarios.