




Glide

Precisión y control total para el fotorrejuvenecimiento de última generación

El láser de CO₂ más novedoso para el fotorrejuvenecimiento

GLIDE se destaca en **medicina estética**

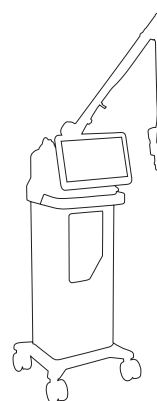

DEKA
Innate Ability

GLIDE

EXCELENCIA EN EVOLUCIÓN

FOTORREJUVENECIMIENTO
CUTÁNEO

CICATRICES DE ACNÉ

REDUCCIÓN DE ARRUGAS
FACIALES

LIFTING
PERIOCULAR

CICATRICES PROFUNDAS

CIRUGÍA
DERMATOLÓGICA



Principios clave

GLIDE es el nuevo láser de CO₂ de DEKA, ha introducido un nuevo sistema y una serie de accesorios más ergonómicos y de alto rendimiento.

El nuevo sistema **GLIDE** se adapta bien al tratamiento de muchas zonas, incluso las más delicadas, como el cuello, el escote y el contorno de ojos.

Why Choosing **GLIDE**:

Garantía de calidad de la experiencia


DEKA ha cristalizado los resultados de 40 años de experiencia en los avances tecnológicos de este dispositivo y sus accesorios.

Control total y máxima eficacia

La fuente láser con tecnología PSD exclusiva y función SMARTSTACK logra niveles de eficacia y seguridad nunca antes alcanzados.

Multidisciplinariedad y flexibilidad

Glide tiene una gama completa de sistemas de escaneo que pueden ampliar la gama de posibles aplicaciones con esta tecnología.

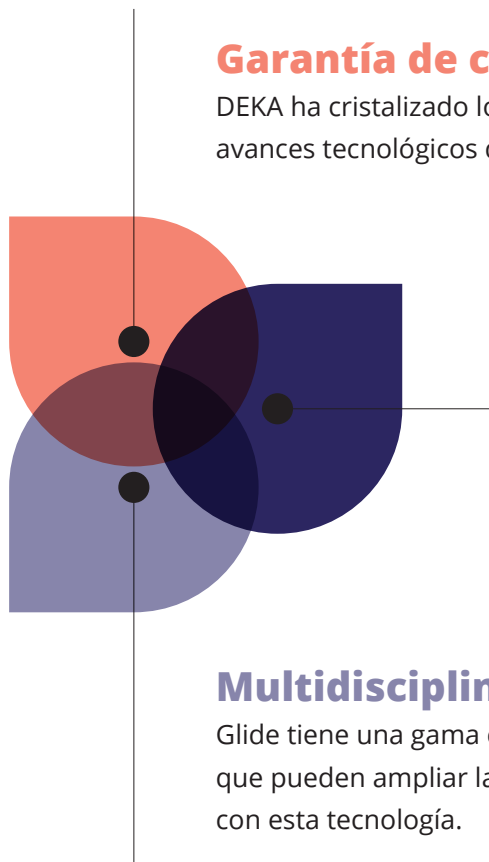

Glide

LA CIENCIA SUBYACENTE


Máxima eficacia, precisión y control total

Tecnología PSD

La tecnología PSD (Pulse Shape Design) permite elegir entre varias modalidades de impulso para poder gestionar de forma selectiva la profundidad de vaporización y el efecto térmico: SmartPulse (SP), DEKAPulse (DP), HighPulse (HP), Ultimate Pulse (UP), CW. Al variar la modalidad de impulso en la zona en cuestión, se obtienen diferentes efectos de ablación y estimulación para satisfacer las diversas necesidades clínicas.

Niveles SmartStack

Para un control de la profundidad de vaporización real y preciso, puede seleccionar entre 5 niveles de SmartStack. A medida que aumenta el nivel de SmartStack se obtiene un aumento progresivo del efecto de contracción, haciendo el tratamiento más efectivo y seguro, reduciendo así el tiempo de recuperación del paciente.

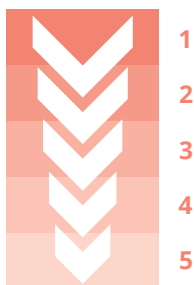

1
2
3
4
5



SmartPulse (SP)



DEKAPulse (DP)




HighPulse (HP)


Modalidad de escaneo inteligente

Modalidad dispersa

La modalidad dispersa escanea uniformemente dentro de toda la zona y se desvanece a lo largo de los bordes para evitar la superposición de puntos para garantizar una mayor uniformidad entre la zona de escaneo y la textura de la piel.

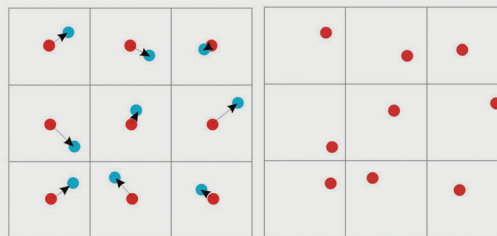

smart·TRACK

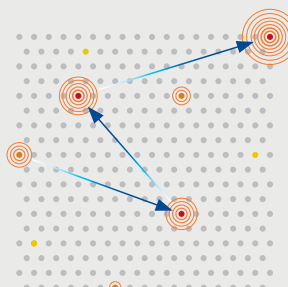

SmartTrack es el algoritmo especialmente desarrollado para optimizar el escaneo de la mano con el fin de minimizar el aumento de temperatura local.




LA CIENCIA SUBYACENTE

Configuración completa con sistemas de escaneo

Glide tiene una gama equipada con nuevos sistemas de escaneo, optimizados en forma, peso, conexión más fácil y tamaño para maximizar el manejo.

μ-Scan DOT

Sistema de escaneo diseñado para garantizar la máxima ergonomía en tratamientos de rejuvenecimiento fraccionados o tradicionales (parámetros modificables: Tamaño, estiramiento y forma de la zona de escaneo).

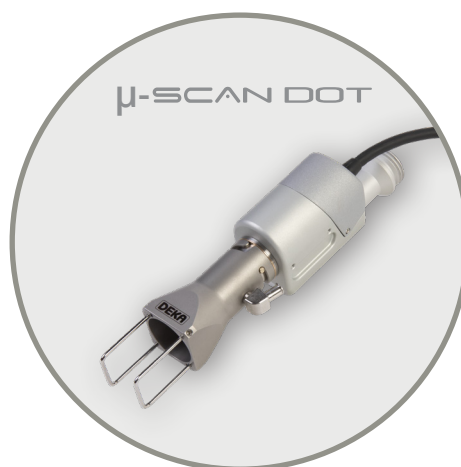

μ-Scar 3

Sistema de escaneo diseñado para remodelar cicatrices profundas. Minimiza el riesgo de hiper e hipopigmentación postratamiento gracias al menor tamaño del punto que genera mayor profundidad de acción con menor energía.

Derma Scan

Sistema de escaneo combinado con piezas de mano con enfoque de 4" y 7" diseñado para ablaciones rápidas y tridimensionales.



LA COMBINACIÓN PERFECTA

Los puntos fuertes de GLIDE

- Proporciona **versatilidad sin compromisos** en técnicas de rejuvenecimiento cutáneo.
- Exclusivas soluciones tecnológicas avanzadas **(PSD y SmartStack)** para maximizar resultados.
- Flexibilidad extrema en la configuración de parámetros y máxima adaptabilidad a los requisitos del paciente.
- Máximo **control y precisión** de uso
- Amplio uso de aplicaciones gracias a **una configuración completa de microscanners.**
- **Más de 30 años de experiencia** en la fabricación de láser de CO₂.



Solo para usuarios de DEKA:

un gran apoyo en la consulta médica

DEKA Club

**GUI intuitiva (pantalla táctil
giratoria de 15,6")**

Tecnología PSD

**Sistemas de escaneo
miniaturizados**

SmartTrack

**Base de datos
multimedia**

Teleasistencia



Especificaciones técnicas

GLIDE - Configuración aconsejada para dermatología y medicina estética	
Tipo de láser	CO ₂ RF - PSD®
Longitud de onda	10,6 µm
Método de emisión	CW - SP - DP - HP - UP
Potencia media a la salida de la pieza de mano	0.1- 60 W
Sistema de transmisión	Brazo articulado 7 espejos
Haz de guía	Diodo de láser @ 635 nm - 4 mW - Intensidad regulable del 1% al 100% o Diodo OFF durante la emisión (DOWL).
Base de datos interna	Más de 100 protocolos incluidos de serie, actualizables por USB. Posibilidad de que el usuario almacene un número ilimitado de protocolos personalizados
Tablero de control	Pantalla táctil LCD a color
Accesorios	µ-Scan Dot, µ-Scar3, Dermascan, amplia gama de piezas de mano
Dimensiones y peso	137 (A) x 42 (L) x 54 (P) cm - 70 kg

*En este catálogo se presentan solo las características técnicas aplicables a dermatología.

Glide también está disponible con configuración ginecológica. Consulte el folleto correspondiente para conocer las características técnicas en ginecología.

PRECAUCIÓN - Radiación láser visible e invisible.
Evite la exposición de la piel o los ojos a la radiación directa o difundida.
Producto con láser de clase 4t.

Este folleto no está destinado al mercado de los EE. UU...



Glide



Sello del distribuidor

 **DEKA M.E.L.A. s.r.l.**
Via Baldanzese,17 - 50041 Calenzano (FI) - Italia
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

Capacidad innata de DEKA
DEKA, una empresa derivada del Grupo El.En., es líder global en el diseño y fabricación de láseres y fuentes de luz para aplicaciones en el ámbito de la medicina. DEKA comercializa sus dispositivos en más de 80 países a través de una amplia red de distribuidores internacionales y oficinas directas en Italia, Francia, Japón y EE.UU. La excelencia es el sello distintivo de la experiencia y el reconocimiento acumulados por DEKA en el ámbito de I+D tras más de treinta años de actividad. La calidad, la innovación y la excelencia tecnológica colocan a DEKA y sus productos en un lugar único y diferenciado en la escena global. DEKA fabrica dispositivos láser de conformidad con las especificaciones de la Directiva 93/42/EEC y su sistema de control de calidad cumple los requisitos de las normas ISO 9001 e ISO 13485.