



SmartXide PUNTO

**Para la salud
vulvovaginal**

MonaLisa *Touch*®

Terapia íntima revolucionaria para la mujer

SmartXide Touch destaca en ginecología



DEKA
Innate Ability

PUNTO

EXCELENCIA EN EVOLUCIÓN

GENITOURINARIO

Síndrome de la menopausia

POSPARTO

Hipoestrogenismo posparto

GENITAL

Cirugía estética y funcional



Principios clave

Una fuente láser de CO₂ única con **tecnología PSD** exclusiva para lograr niveles de rendimiento nunca antes alcanzados en aplicaciones dermatológicas y ginecológicas.

SMARTXIDE PUNTO permite realizar el tratamiento **MonaLisa Touch**: el procedimiento más conocido para tratar afecciones vulvovaginales en mujeres menopáusicas, supervivientes de cáncer de mama e hysterectomizadas.

Por qué elegir PUNTO:

MonaLisa Touch®


El único procedimiento láser validado científicamente para la salud íntima de la mujer. Más de 80 publicaciones internacionales arbitradas y ensayos clínicos han confirmado la gran eficacia y seguridad del procedimiento MonaLisa Touch.

Versatilidad sin igual

Los cuatro modos de pulso disponibles y la exclusiva tecnología PSD permiten a los profesionales elegir el pulso adecuado para cualquier área de tratamiento. Se ha desarrollado específicamente una forma de pulso especial –pulso D– para el tratamiento eficaz y seguro de la mucosa vaginal.

Conocimiento y experiencia

SmartXide PUNTO es el resultado de décadas de experiencia pionera en láseres de CO₂.

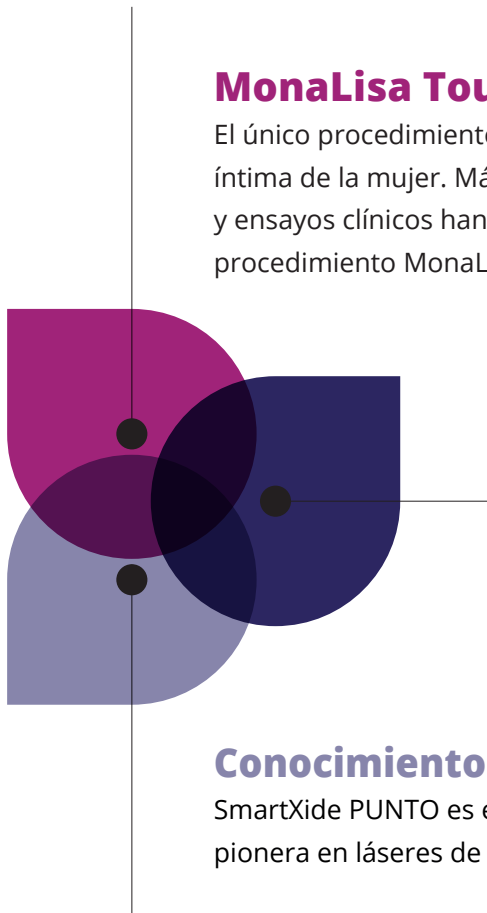



Dispareunia

Comezón y ardor

Sequedad vaginal


MonaLisa Touch®

**EL PRIMER E INIGUALABLE
TRATAMIENTO PARA EL SÍNDROME
GENITOURINARIO DE LA MENOPAUSIA**

MonaLisa Touch® actúa sobre el tejido vaginal atrófico para restaurar la funcionalidad de la mucosa vaginal. No invasiva y segura, la terapia de MonaLisa ha demostrado ser altamente efectiva y tolerarse bien. El láser de CO₂ administra energía controlada a través de una sonda de ángulo completo que se inserta en el canal vaginal. El pulso D se dirige tanto al tejido superficial como


al profundo, aumentando la microcirculación, revitalizando la elasticidad de la mucosa vaginal y mejorando la hidratación y la sensibilidad de la zona vulvovaginal. Como resultado, MonaLisa resuelve los problemas más comunes que afectan la calidad de vida y las relaciones íntimas de las mujeres, como la sequedad vaginal, la picazón y el ardor y la dispareunia.

Resultados clínicos

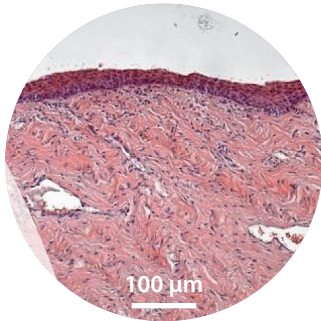


ANTES

Tratamiento MonaLisa Touch.
Estudios morfológicos demuestran la
recuperación del trofismo metabólico y de
la dinámica de todo el epitelio.
Cortesía del **Prof. A. Calligaro**.
Universidad de Pavía, Italia.

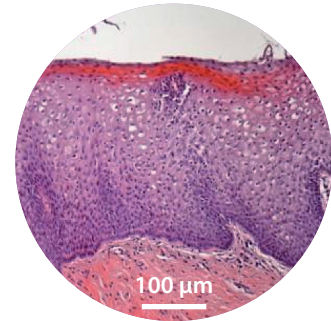


DESPUÉS

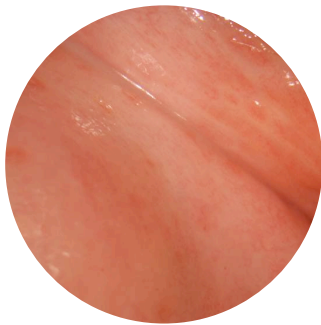

ANTES

Tratamiento MonaLisa Touch.
Imágenes colposcópicas de la mucosa vaginal.
Cortesía de los **Dres. MG Fallani y A. Pieralli**,
y de los Prof. S. Guaschino y C. Penna
Hospital Universitario Careggi. Florencia, Italia.

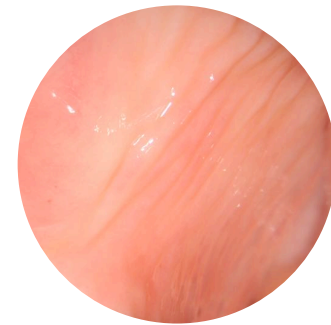

DESPUÉS



ANTES

Cirugía vulvovaginal estética y funcional.
Labiooplastia por láser de CO₂ combinada
con injerto de grasa.
Cortesía del **Dr. P. González Isaza**
Pereira, Colombia.



DESPUÉS

LA CIENCIA SUBYACENTE

μ -SCAN V²LR

Velocidad y repetibilidad del tratamiento

Exclusiva **sonda Hi-Scan V²LR**: el aplicador de ángulo completo que emite energía láser a **360°**, garantiza tratamientos rápidos y perfectos, fáciles de reproducir en distintas sesiones y con distintos pacientes.



MADE IN ITALIA

Los sistemas y dispositivos DEKA están todos diseñados y ensamblados en Italia. Para lograr nuestros objetivos de sostenibilidad, así como la trazabilidad, transparencia y fiabilidad de nuestra cadena de suministro, establecemos estándares ambientales internacionales para nosotros mismos y nuestros proveedores.

HECHO DE MANERA SOSTENIBLE


Perfecta interacción del láser con los tejidos

D-Pulse es una forma de pulso exclusiva, diseñada específicamente por DEKA para el tratamiento MonaLisa Touch a fin de garantizar la máxima eficacia (mediante el uso de la profundidad de penetración adecuada) sin ningún efecto secundario (control del efecto térmico).



Tratamiento rápido e indoloro

La energía láser se aplica a las paredes vaginales en un modo fraccional (tratamiento DOT): solo un pequeño porcentaje del tejido vaginal se ve afectado directamente por el láser.

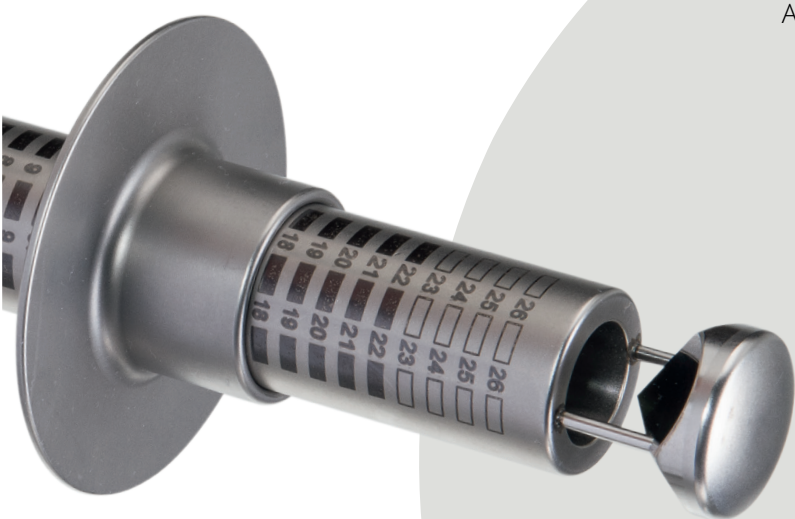


MAXIMUM PATIENT ADAPTABILITY

Availability of different types of probes to address the specific clinical and/or anatomic needs of individual patients.



(360° autoclavable)

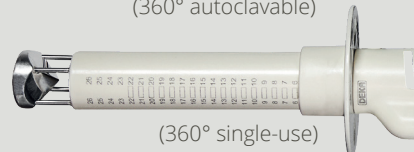

(360° single-use)



(23 mm diameter)



(16 mm diameter)



(vulvar applicator)



Redefiniendo la efectividad

COMITÉ ASESOR INTERNACIONAL


En 2020, DEKA estableció un Comité Asesor Médico internacional para la Salud Íntima Femenina, que incluye profesores y expertos reconocidos de todos los continentes. El comité está comprometido con el desarrollo de nuevos protocolos y orientación clínica, y con el avance de las técnicas y los métodos láser.

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS ARBITRADAS

Más de 75 publicaciones internacionales arbitradas han confirmado la gran eficacia y seguridad del tratamiento MonaLisa Touch.

RESULTADOS COMPROBADOS

MonaLisa Touch® es el único procedimiento probado por miles de tratamientos exitosos en todo el mundo.

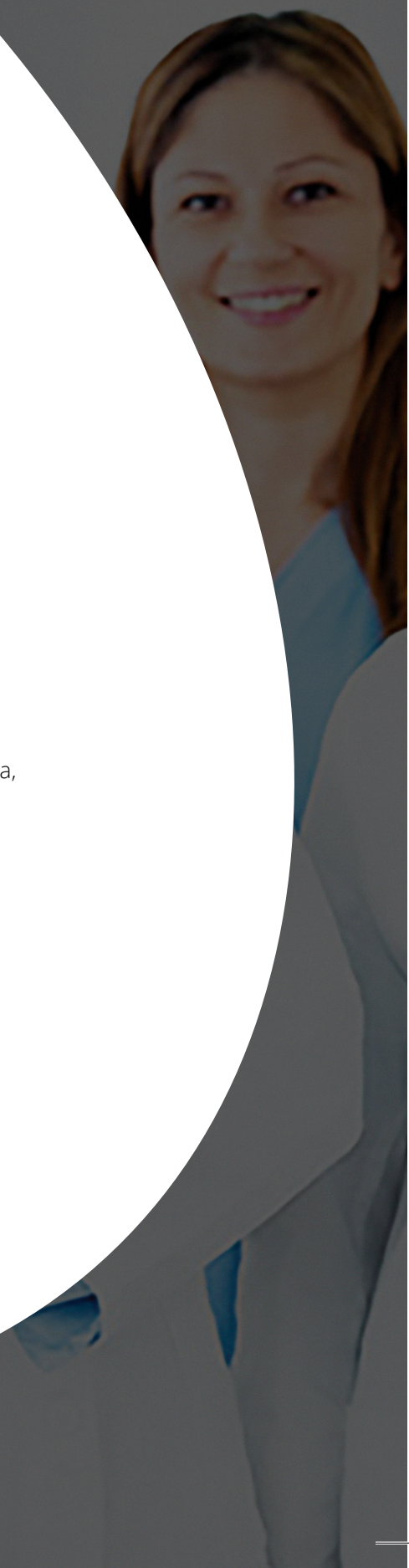

Opinión de los profesionales sanitarios

“ Comenzamos a probar MonaLisa Touch® y a tratar pacientes en 2012. Al principio, yo era muy escéptico por lo que respecta al uso del láser para la estimulación vaginal porque, en aquel momento, no había pruebas que pudiesen ofrecer credibilidad en ginecología. ¡Con el tiempo, tanto los resultados clínicos como los histológicos superaron mis expectativas! Los estudios histológicos llevados a cabo en colaboración con el Prof. Alberto Calligaro de la Universidad de Pavía, demostraron que el tratamiento MonaLisa Touch® restaura el estado premenopáusico de la mucosa, como ocurriría tras un tratamiento de sustitución hormonal con estrógenos.”

Stefano Salvatore, Doctor en Medicina

Profesor adjunto de obstetricia y ginecología, Universidad Vita e Salute San Raffaele, jefe de la Unidad de Uroginecología del Hospital IRCCS San Raffaele, Milán (Italia)

“ Una revolución es, literalmente, un cambio muy radical en la forma de hacer las cosas y esto no sucede muy a menudo en medicina. Me gusta decir que MonaLisa Touch® es revolucionario porque está colmando un vacío enorme para las mujeres. Yo estaba más que dispuesto a probarlo porque hay una necesidad enorme. Esta es un área terapéutica amplia. Los resultados son casi inmediatos.”

Mickey Karram, Doctor en Medicina

Director del programa de becas de investigación para Medicina pélvica femenina y Cirugía reconstructiva, The Christ Hospital, Cincinnati, OH (EE. UU.)

“ Considero que el tratamiento MonaLisa Touch® marca un hito para varias aplicaciones uroginecológicas, tales como el síndrome genitourinario de la menopausia (GSM), la atrofia vaginal asociada al cáncer y trastornos de dispareunia que no responden bien a los tratamientos tradicionales. Todos nuestros pacientes refirieron una mejoría importante en los síntomas y en su calidad de vida.”

Pablo González Isaza, Doctor en Medicina

Especialista en Obstetricia y Ginecología, Hospital Universitario San Jorge, Pereira (Colombia)
Presidente de la Asociación de Ginecólogos Estéticos de Colombia

LA COMBINACIÓN PERFECTA

Ventajas de PUNTO

Los operadores y los pacientes se benefician de:

- La única **terapia láser en profundidad validada** para la salud íntima de la mujer
- Un dispositivo diseñado para regenerar la mucosa vulvovaginal
- Una trayectoria de **cientos de miles de tratamientos exitosos** en todo el mundo
- **Máxima seguridad** y comodidad
- Excelentes resultados sin tiempo de recuperación
- La herramienta más avanzada para tratar los síntomas genitourinarios



Solo para usuarios de DEKA:
un gran apoyo para la práctica médica

DEKA Club

**Brazo articulado
de 7 espejos**

**Escáner
de alta precisión**

**Sonda
360° V²LR**

**GUI de
software**

**Protocolos integrados
específicamente diseñados
para ginecología**



Especificaciones técnicas

SMARTXIDE PUNTO	
Tipo de láser	CO ₂ RF- PSD – 10.600 nm
Potencia	0,5-30 W 0,5-50 W
Dimensiones y peso	122 (Al.) x 42 (An.) x 54 (Pr.) cm 62 kg
Requisitos eléctricos	100-230 V ca; 50/60 Hz; 1200 VA
SISTEMA DE BARRIDO HI-SCAN V ² LR	
Zona de barrido	8x8 mm (forma: cuadrada) y 13x13 mm (forma: marco cuadrado)
Métodos de barrido	Normal - Entrelazado - SmartTrack
Niveles de SmartStack	De 1 a 5
Sondas	De ángulo completo a 360°, tanto esterilizables en autoclave como desechables (opcional) Ángulo simple de 90° (opcional) Sonda vulvar recta

PELIGRO - Radiación láser visible e invisible. Evite la exposición de la piel o los ojos a la radiación directa o difundida. Producto con láser de clase 4.
Este folleto no está destinado al mercado de los EE.UU.



Síganos en:



www.dekalaser.com



Innate Ability

SELLO DEL DISTRIBUIDOR



DEKA M.E.L.A. s.r.l.
Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI) - Italia
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

Capacidad innata de DEKA
DEKA, una empresa derivada del Grupo ELn., es líder global en el diseño y fabricación de láseres y fuentes de luz para aplicaciones en el ámbito de la medicina. DEKA comercializa sus dispositivos en más de 80 países a través de una amplia red de distribuidores internacionales y oficinas directas en Italia, Francia, Japón y EE.UU. La excelencia es el sello distintivo de la experiencia y el reconocimiento acumulados por DEKA en el ámbito de I+D tras más de treinta años de actividad. La calidad, la innovación y la excelencia tecnológica colocan a DEKA y sus productos en un lugar único y diferenciado en la escena global. DEKA fabrica dispositivos láser de conformidad con las especificaciones de la Directiva 93/42/EEC y su sistema de control de calidad cumple los requisitos de las normas ISO 9001 e ISO 13485.

DEKA M.E.L.A. s.r.l.- Todos los derechos reservados - Con el propósito de mejorar sus productos, la empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso. Documento reservado exclusivamente para profesionales sanitarios.