

DEKA
Innate Ability

EL NUEVO **SISTEMA PRO**

TETRA
PRO

Para la salud vulvovaginal

Monalisa Touch[®]

Terapia íntima revolucionaria
para la mujer

Tetra PRO destaca en **Ginecología**



TETRA PRO

EXCELENCIA EN EVOLUCIÓN

GENITOURINARIO

Síndrome de la menopausia

POSPARTO

Hipoestrogenismo posparto

GENITAL

Cirugía estética y funcional



Principios clave

Una fuente láser de CO₂ única con tecnología **PSD exclusiva** para lograr niveles de rendimiento nunca antes alcanzados en aplicaciones dermatológicas y ginecológicas.

Tetra PRO permite realizar el tratamiento **MonaLisa Touch®**: el procedimiento más conocido para tratar afecciones vulvovaginales en mujeres menopáusicas, supervivientes de cáncer de mama e hysterectomizadas.

Por qué elegir TETRA PRO:

MonaLisa Touch®


El único procedimiento láser validado científicamente para la salud íntima de la mujer. Más de 100 publicaciones internacionales arbitradas y ensayos clínicos han confirmado la gran eficacia y seguridad del procedimiento MonaLisa Touch®.

Versatilidad sin iguales

Los cuatro modos de pulso disponibles y la exclusiva tecnología PSD permiten a los profesionales elegir el pulso adecuado para cualquier área de tratamiento. Se ha desarrollado específicamente una forma de pulso especial –pulso D– para el tratamiento eficaz y seguro de la mucosa vaginal.

Conocimiento y experiencia

TETRA PRO es el resultado de décadas de experiencia pionera en láseres de CO₂.

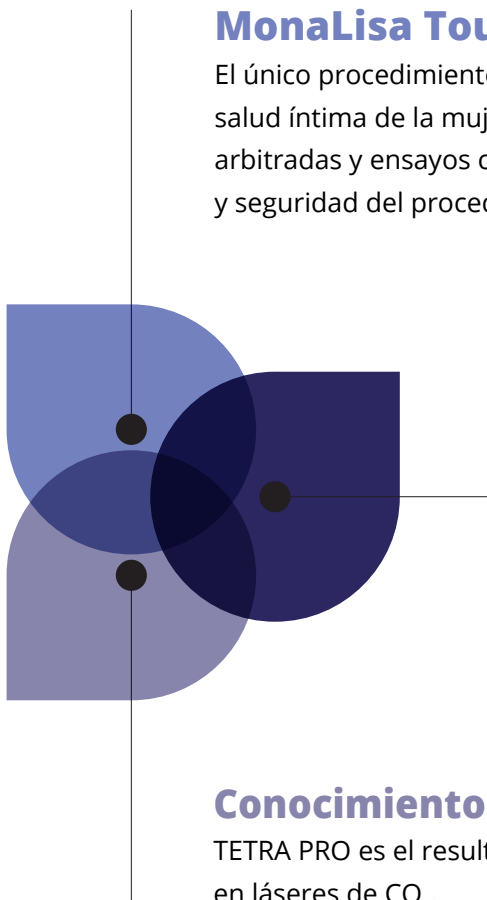



Dispareunia

Comezón y ardor

Sequedad vaginal


MonaLisa Touch®

El primer e inigualable tratamiento para el síndrome genitourinario de la menopausia

MonaLisa Touch® actúa sobre el tejido vaginal atrófico para restaurar la funcionalidad de la mucosa vaginal. No invasiva y segura, la terapia de MonaLisa ha demostrado ser altamente efectiva y tolerarse bien. El láser de CO₂ administra energía controlada a través de una sonda de ángulo completo que se inserta en el canal vaginal. El pulso D se dirige tanto al tejido superficial como


al profundo, aumentando la microcirculación, revitalizando la elasticidad de la mucosa vaginal y mejorando la hidratación y la sensibilidad de la zona vulvovaginal. Como resultado, MonaLisa resuelve los problemas más comunes que afectan la calidad de vida y las relaciones íntimas de las mujeres, como la sequedad vaginal, la picazón y el ardor y la dispareunia.

Resultados clínicos

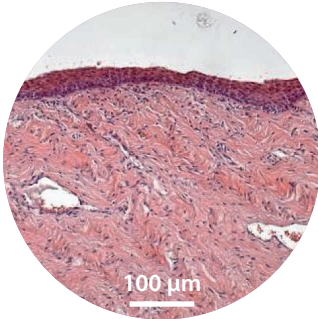


ANTES

Tratamiento MonaLisa Touch.
Estudios morfológicos demuestran la
recuperación del trofismo metabólico y de
la dinámica de todo el epitelio.
Cortesía del **Prof. A. Calligaro**.
Universidad de Pavía, Italia.

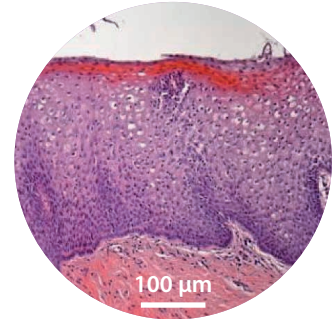


DESPUÉS

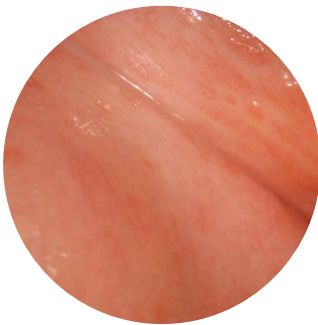


ANTES

Tratamiento MonaLisa Touch.
Imágenes colposcópicas de la mucosa vaginal.
Cortesía de los **Dres. MG Fallani y A. Pieralli,**
y de los Prof. S. Guaschino y C. Penna
Hospital Universitario Careggi. Florencia, Italia.

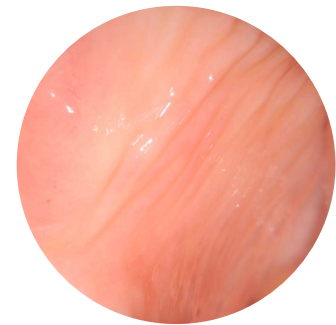


DESPUÉS

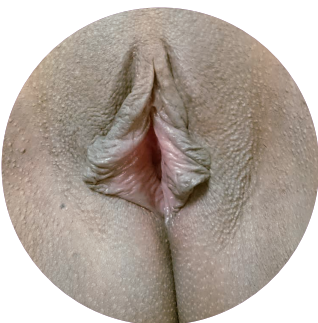

ANTES

Cirugía vulvovaginal estética y funcional. Labioplastia
por láser de CO₂ combinada con injerto de grasa.
Cortesía del **Dr. P. González Isaza**
Pereira, Colombia.

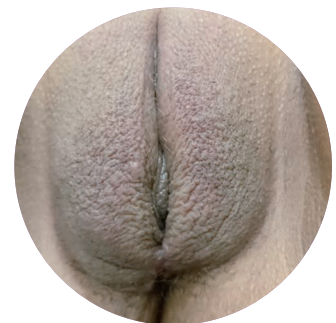

DESPUÉS

LA CIENCIA SUBYACENTE

V²LR PRO

Velocidad y repetibilidad del tratamiento

Exclusiva **sonda V²LR PRO**: el aplicador de ángulo completo que emite energía láser a **360°**, garantiza tratamientos rápidos y perfectos, fáciles de reproducir en distintas sesiones y con distintos pacientes.



HECHO EN ITALIA

Los sistemas y dispositivos DEKA están todos diseñados y ensamblados en Italia.

Para lograr nuestros objetivos de sostenibilidad, así como la trazabilidad, transparencia y fiabilidad de nuestra cadena de suministro, establecemos estándares ambientales internacionales para nosotros mismos y nuestros proveedores.

HECHO DE MANERA SOSTENIBLE

Perfecta interacción del láser con los tejidos

D-Pulse es una forma de pulso exclusiva, diseñada específicamente por DEKA para el tratamiento MonaLisa Touch a fin de garantizar la máxima eficacia (mediante el uso de la profundidad de penetración adecuada) sin ningún efecto secundario (control del efecto térmico).



Tratamiento rápido e indoloro

La energía láser se aplica a las paredes vaginales en un modo fraccional (tratamiento DOT): solo un pequeño porcentaje del tejido vaginal se ve afectado directamente por el láser.

Máxima capacidad de adaptación al paciente

Diversos tipos de sondas disponibles para responder a las necesidades clínicas y/o anatómicas específicas de cada paciente.



(Sonda 360°)



(23 mm de diámetro)



(16 mm de diámetro)



(Aplicador vulvar)



Redefiniendo la efectividad

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS ARBITRADAS

Más de 100 publicaciones internacionales arbitradas han confirmado la gran eficacia y seguridad del tratamiento MonaLisa Touch®.

RESULTADOS COMPROBADOS

MonaLisa Touch® es el único procedimiento probado por miles de tratamientos exitosos en todo el mundo.

CUIDANDO LA SALUD ÍNTIMA

MonaLisa Touch® es el primer tratamiento para la salud íntima femenina, sector en el que es años DEKA ha invertido recursos y atención para completar la oferta con el tratamiento del dolor pélvico y la incontinencia urinaria con el Dr. Arnold.

Testimonio de profesionales

“ Comenzamos a probar MonaLisa Touch® y a tratar pacientes en 2012. Al principio, yo era muy escéptico por lo que respecta al uso del láser para la estimulación vaginal porque, en aquel momento, no había pruebas que pudiesen ofrecer credibilidad en ginecología. ¡Con el tiempo, tanto los resultados clínicos como los histológicos superaron mis expectativas! Los estudios histológicos llevados a cabo en colaboración con el Prof. Alberto Calligaro de la Universidad de Pavía, demostraron que el tratamiento MonaLisa Touch® restaura el estado premenopáusico de la mucosa, como ocurriría tras un tratamiento de sustitución hormonal con estrógenos.”

Stefano Salvatore, Doctor en Medicina

Profesor adjunto de obstetricia y ginecología, Universidad Vita e Salute San Raffaele, jefe de la Unidad de Uroginecología del Hospital IRCCS San Raffaele, Milán (Italia)

“ Una revolución es, literalmente, un cambio muy radical en la forma de hacer las cosas y esto no sucede muy a menudo en medicina. Me gusta decir que MonaLisa Touch® es revolucionario porque está colmando un vacío enorme para las mujeres. Yo estaba más que dispuesto a probarlo porque hay una necesidad enorme. Esta es un área terapéutica amplia. Los resultados son casi inmediatos.”

Mickey Karam, Doctor en Medicina

Director del programa de becas de investigación para Medicina pélvica femenina y Cirugía reconstructiva, The Christ Hospital, Cincinnati, OH (EE. UU.)

“ Fui uno de los primeros profesionales de ginecología en creer en la terapia con láser de CO₂ para el tratamiento de la atrofia vulvovaginal, tanto es así que desde 2013 hasta hoy he realizado más de 4100 tratamientos en aproximadamente 1500 pacientes, con un promedio de aproximadamente 60 tratamientos por mes, y con una tasa de éxito que alcanza el 75-80%. Las características de este sistema láser con formas de pulso y escaneo totalmente programables y controlables permiten realizar el tratamiento MonaLisa Touch®, un tratamiento que, partiendo de Italia, desde entonces se ha extendido por todo el mundo con grandes beneficios para la salud íntima de la población femenina. La atrofia vulvovaginal sigue siendo el primer objetivo de la terapia con láser de CO₂ MonaLisa Touch® realizada con Tetra PRO, pero no el único, ya que este dispositivo también actúa mejorando la recurrencia de la cistitis crónica, la incontinencia urinaria por atrofia vulvovaginal y la vejiga hiperactiva, los síntomas dolorosos posparto, la vestibulo-vulvodinia y los síntomas del liquen escleroatrófico, y en general todas aquellas afecciones que impiden a la pareja tener una buena relación y en consecuencia una buena salud sexual.”

Maurizio Filippini, Doctor en Medicina

Jefe del Módulo Funcional de Endoscopia Ginecológica, ISS Instituto de Seguridad Social de la República de San Marino, UOC de Obstetricia y Ginecología, República de San Marino

LA COMBINACIÓN PERFECTA

Ventajas de TETRA PRO

Los operadores y los pacientes se benefician de:

- La única **terapia láser en profundidad validada** para la salud íntima de la mujer
- Un dispositivo diseñado para regenerar la mucosa vulvovaginal
- Una trayectoria de **cientos de miles de tratamientos exitosos** en todo el mundo
- **Máxima seguridad** y comodidad
- Excelentes resultados sin tiempo de recuperación
- La herramienta más avanzada para tratar los síntomas genitourinarios



Solo para usuarios de DEKA:

un gran apoyo en la consulta médica

DEKA *Club*

Brazo articulado
de 7 espejos

Interfaz gráfica
del usuario

Sistema de escaneo
V²LR PRO con espaciador
esterilizable

RF CO₂
fuente láser



Especificaciones técnicas

TETRA PRO	
Tipo de láser	CO ₂ RF- PSD – 10,600 nm
Potencia	0.1-40 W
Dimensiones y peso	124 (H) cm x 64 (W) cm x 66 (D) cm 62 Kg
Requisitos eléctricos	100-230 Vac – 50/60 Hz – 1200VA
SISTEMA DE BARRIDO V ² LR PRO	
Zona de barrido	8x8 mm (forma: cuadrada) y 13x13 mm (forma: marco cuadrado)
Métodos de barrido	Normal - Entrelazado - SmartTrack
Niveles de SmartStack	De 1 a 5
Sondas	De ángulo completo a 360° Ángulo simple de 90° (opcional) Sonda vulvar recta

PELIGRO - Radiación láser visible e invisible. Evitar la exposición de la radiación directa o dispersa en los ojos o la piel. Producto láser de clase 4.

Este folleto no está destinado al mercado estadounidense.

CE
0123

TETRA
PRO

DEKA
Innate Ability



Sello del distribuidor



DEKA M.E.L.A. s.r.l.

Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI) - Italia
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

DEKA Innate Ability

DEKA, una spin-off del grupo El.En., es una empresa líder en el diseño y producción de láseres y sistemas de iluminación para aplicaciones médicas. DEKA comercializa sus equipos en más de 80 países a través de una red de distribuidores en los mercados internacionales y de sucursales directas en Francia, Japón y EE.UU. DEKA fabrica dispositivos láser de conformidad con el Reglamento de Productos Sanitarios 2017/745/UE y su Sistema de gestión de la calidad certificado según las normas ISO 9001 e ISO 13485.